


土壤粉碎机 SG1 型

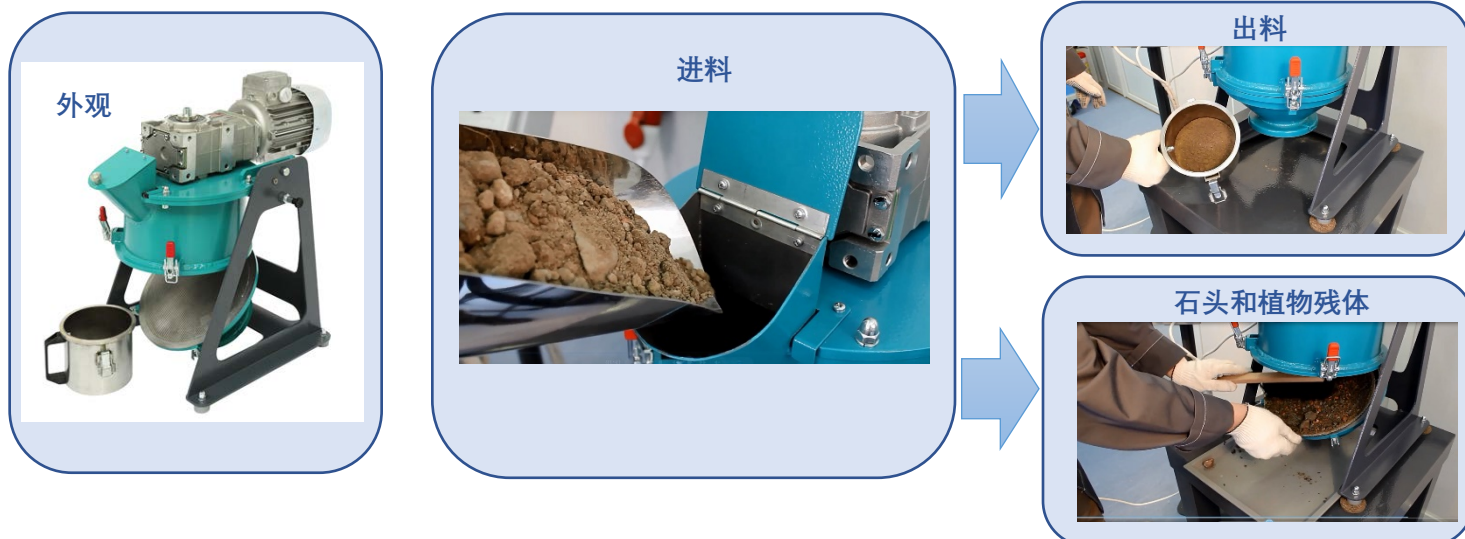

土壤粉碎机 SG1 型用于粉碎干土壤样品，对石头和植物残体进行自动隔离不粉碎。

物料颗粒经滚筒碾压进行粉碎。粉碎出料粒径大小取决于出料网孔孔径、滚筒轴位置，并跟物理性能有关系。

装料窗口尺寸,mm	100x100
滚筒尺寸, mm (直径 x 宽度)	55x27
平滑滚筒/锯齿滚筒数量, 件	4/4
装料最大尺寸, 不大于,mm	20
出料筛网孔径, mm	1 或 2
出料筛网孔径 1mm 出料颗粒平均粒径, mm	1
粉碎能力, kg/小时, 不大于	50
电动机功率, kW	0.75
电动转数, rpm	78
供电电压, 50 Hz, V	380
外形尺寸, mm (长度 x 宽度 x 高度)	725x315x700
重量, kg	55
滚筒材料 - 工具钢	XBG, 65Г, 9XC

俄罗斯对外电子公司北京代表处

北京市朝阳区十里堡甲 3 号都会国际 23E

(010) 65564916, 13910399989 联系人: 克利姆

e-mail: beijing@jinkou17.cn

<http://www.spectroscan.cn>